

Clearblue^{MD}

Test de grossesse

Détection ultra précoce digitale



Pour usage personnel. Veuillez lire cette notice attentivement avant d'effectuer un test.



Testez à partir de

6 jours
avant

l'absence de règles!



Si vous faites un test précoce, utilisez votre première urine au réveil. Sinon, vous pouvez effectuer le test à n'importe quel moment de la journée.



Évitez de trop boire

avant de faire le test



Ne tenez jamais le bâtonnet-test avec l'extrémité absorbante orientée vers le haut

1 Faites le test

Retirez le bâtonnet-test de la pochette protectrice, retirez le capuchon et utilisez-le immédiatement. **Pour réaliser le test**, vous pouvez utiliser :



vosre jet d'urine



immergez jusqu'à ce niveau



un échantillon d'urine recueilli

Retirez l'extrémité absorbante de l'urine lorsque le voyant lumineux **COMMENCE** à clignoter.

Cela prend généralement environ 5 secondes. Le voyant continue de clignoter brièvement, puis s'éteint. Gardez l'extrémité absorbante orientée vers le bas, remettez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat.

2 Attendez


L'indicateur de progression intelligent sera affiché à l'écran et chaque segment apparaîtra dans l'ordre pour montrer la progression du test.



Si l'indicateur de progression intelligent ne s'affiche pas, consultez la section « Erreurs lors du test ».

3 Lisez votre résultat


L'indicateur de progression intelligent se terminera sous 1 à 5 minutes et votre résultat apparaîtra à l'écran.

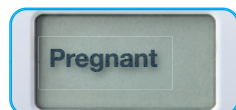

Enceinte

Les résultats sont fiables à plus de 99 %, quel que soit le moment auquel vous choisissez d'effectuer le test.

Reportez-vous à la question 1 pour plus d'informations.

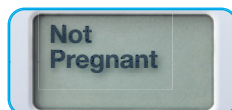

Pas Enceinte

Reportez-vous à la question 2 pour plus d'informations.

Questions et réponses

1 Mon résultat est « Enceinte ». Que dois-je faire?

Consultez votre médecin, qui pourra vous conseiller sur la marche à suivre.

Il est possible d'obtenir un résultat positif et de découvrir plus tard que vous n'êtes plus enceinte. Reportez-vous à la question 6.

Un résultat « Enceinte » reste affiché à l'écran pendant un mois maximum.

2 Mon résultat est « Pas Enceinte ». Qu'est-ce que cela signifie?

Il se peut que vous ne soyez pas enceinte ou que votre taux d'hormone de grossesse ne soit pas suffisamment élevé pour être détecté.

Faites un autre test dans trois jours. Si le résultat de ce test est à nouveau « Pas Enceinte », mais que vos règles sont en retard, consultez votre médecin.

3 À partir de quand puis-je effectuer le test?

Vous pouvez effectuer un test 6 jours avant l'absence de règles (5 jours avant la date prévue de vos règles).

Si vous obtenez un résultat « Enceinte », celui-ci est fiable à plus de 99 %, quel que soit le moment auquel vous avez effectué le test.

Cependant, comme les concentrations hormonales varient d'une femme à l'autre et peuvent être très faibles en début de grossesse, vous pouvez être enceinte, mais obtenir un résultat négatif.

Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de grossesses détectées lors de tests en laboratoire avec des échantillons d'urine prélevés en tout début de grossesse :

Jours avant l'absence de règles	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Grossesses détectées	>99 %	>99 %	>99 %	99 %	93 %	78 %

4 Comment fonctionne Clearblue?

Le test détecte l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine) dans l'urine.

La sensibilité du test est de 10 mUI/ml.

Il s'est révélé précis à plus de 99 % lors de tests en laboratoire à partir de la date prévue des règles.

5 Certains médicaments ou états pathologiques peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?

Avant d'effectuer un test, lisez toujours les instructions du fabricant concernant les médicaments que vous prenez. Les médicaments contenant de l'hCG et certains états pathologiques rares peuvent donner des résultats faux positifs. Une grossesse extra-utérine ou une grossesse récente, même si elle n'a pas été menée à terme, peuvent donner des résultats inexactes.

Si vous êtes en période de ménopause ou que vous vous en approchez, vous pouvez obtenir un résultat faux positif « Enceinte », même si vous n'êtes pas enceinte.

Les traitements hormonaux contenant du citrate de clomifène, les analgésiques, l'alcool, les antibiotiques et la pilule contraceptive **NE** devraient **PAS** influencer le résultat du test. Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d'en parler à votre médecin.

6 J'ai effectué le test auparavant et le résultat indiquait « Enceinte », mais j'ai de nouveau effectué le test et j'ai obtenu un résultat négatif, ou j'ai eu mes règles. Qu'est-ce que cela signifie?

Il est possible d'obtenir un résultat positif et de découvrir plus tard que vous n'êtes plus enceinte. C'est ce qu'on appelle la « fausse-couche en tout début de grossesse », ce qui n'est malheureusement pas rare. Environ 1 grossesse sur 4 est touchée. Heureusement, la majorité des femmes peuvent ensuite retomber enceinte sans problèmes.

7 Y a-t-il quelque chose que je devrais faire si je souhaite concevoir?

Vous pouvez tout d'abord en parler à votre médecin. De nombreux médecins conseillent de prendre de l'acide folique ou des suppléments vitaminiques prénataux, d'éviter l'alcool, d'arrêter de fumer et d'essayer de maintenir un poids santé. Vous pouvez également envisager d'utiliser un test d'ovulation pour détecter vos jours les plus fertiles. Clearblue propose une gamme de produits pour vous aider à maximiser vos chances de concevoir.

Erreurs lors du test




Erreur d'utilisation

Une erreur s'est produite pendant le test. La raison peut être la suivante :

- l'extrémité absorbante n'était pas orientée vers le bas;
- le test n'a pas été mis à plat après l'application de l'urine; ou
- trop ou trop peu d'urine a été appliquée sur l'extrémité absorbante.

Faites à nouveau le test en utilisant un nouveau bâtonnet et suivez attentivement les instructions.

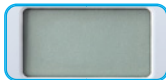

Absence d'affichage

Si l'indicateur de progression intelligent n'est pas apparu après le test ou s'est affiché sur l'écran puis a disparu, vous devez effectuer un autre test. Faites à nouveau le test en utilisant un nouveau bâtonnet et suivez attentivement les instructions.

www.clearblue.com

Ligne Assistance Clearblue

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00, HNE.

1 888 698 5039 Appel gratuit depuis téléphone fixe.

Veuillez vous munir du produit et de l'emballage comprenant la pochette d'aluminium lors de votre appel. Les appels sont enregistrés à des fins de formation et de contrôle de la qualité.

Pour usage personnel à domicile. Pour usage diagnostique *in vitro*. Réservé à un usage externe. Ne pas réutiliser. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver entre 2 et 30 °C. Laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes avant l'utilisation si le test est conservé au réfrigérateur. Ne pas utiliser si la pochette protectrice est endommagée. Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation. Ce produit contient des piles. Ne pas démonter l'appareil, ne pas recharger les piles et ne pas les jeter au feu. Contient des pièces de petite taille. Ne pas ingérer les composants de cet appareil. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin. Jeter conformément à la réglementation locale. Signaler à Clearblue toute blessure causée par l'utilisation de ce produit.

Fabricant : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland.

Clearblue est une marque de commerce de SPD.

© 2021 SPD. Tous droits réservés.

78 % des résultats « Enceinte » peuvent être détectés 6 jours avant l'absence de règles (5 jours avant la date prévue de vos règles).

Cet appareil numérique de diagnostic *in vitro* est conforme à la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada, gestion du spectre et télécommunications. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Les contre-mesures CEM utilisées dans cet instrument électronique offriront une protection raisonnable contre les effets de l'interférence électromagnétique typiques des environnements domestiques. N'utilisez pas cet instrument à proximité de sources de fortes radiations électromagnétiques (telles que des téléphones cellulaires), qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Santé Canada conseille aux femmes enceintes d'éviter de consommer de l'alcool pendant la grossesse parce que les effets de l'alcool peuvent présenter des risques pour le bébé, comme le Syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF). Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.hc-sc.gc.ca.

Le Test de grossesse Clearblue Détection ultra précoce digitale est un test d'urine hCG (gonadotrophine chorionique humaine) en vente libre qui est destiné à la détection de la grossesse. Le test est indiqué pour une utilisation à partir de 5 jours avant la date prévue de vos règles (6 jours avant l'absence de règles).